

酵素反応・加水分解・恒温保持に 試料温度をより正確に制御

アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス

MG-3000・3100・3200型



MG-3000



MG-3100




MG-3200

アルミブロックは別売りです。

従来のアルミブロックの半分のサイズ 「ハーフブロック」をラインナップ

従来の「レギュラーブロック」と「ハーフブロック」は互換性があり、レギュラーブロック1個＝ハーフブロック2個の構成になります。
種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。

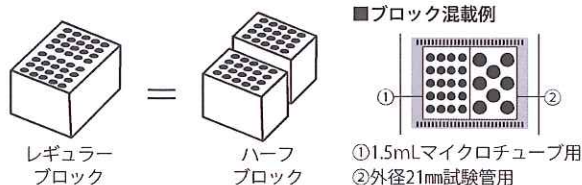

型 式	MG-3000	MG-3100	MG-3200
製品コードNo.	273870	273860	273880
温度調節範囲	室温+5～200℃		
温度調節精度	±0.1℃		
アルミブロック 設置数 (ブロックは別売り)	ハーフ1個	1:レギュラー1個 2:ハーフ2個	1:レギュラー2個 2:レギュラー1個+ハーフ2個 3:ハーフ4個
温度制御	P.I.D制御		
温度表示	デジタル液晶表示 (PV・SV同時表示)		
安全機能	アラーム機能 (上限温度警報、ループ異常、停電、オートチューニングエラー、センサ断線/短絡、周囲温度異常、メモリーエラー)、ヒューズ、独立過昇防止		
タイマ・プログラム機能	オートスタート、オートストップ・1パターン・8ステップ (最大)		
温度センサ	白金測温抵抗体 Pt100Ω		
外寸法 (mm)	137W×310D×125H	200W×310D×125H	260W×320D×125H
電源入力	1.3A、130VA	2.5A、250VA	3.9A、390VA
電源電圧	AC100V 50/60Hz		
価格 (本体)	¥85,000	¥95,000	¥110,000

※ 室温20℃、定格電源電圧 (AC100V、50Hz)、アルミブロック MGB-1524型、試料なしでの値です。
※ ハーフブロックは従来機種 MG-2200・2300型でも使用できます。

少数の検体向け、卓上型をラインナップ

少数の検体を卓上で手軽に温調できるハーフブロック専用のMG-3000型が新たに加わりました。

オプション

アルミブロック

使用容器径に合わせてアルミブロックの選定が必要です。
0.5・1.5mLマイクロチューブ用、外径12・15・16.5・18・21・24・25・30mm
試験管用のアルミブロックを搭載できます。
※30mm試験管用はレギュラーのみです。

アルミブロック(ハーフブロック)

MGBH型シリーズ

価格 ¥14,000

アルミブロック(レギュラーブロック)

MGB型シリーズ

価格 ¥28,000



試料温度センサ



MG-3000+SENS-TT

オプションの試料温度センサを使用することで、試料の実温度を確認し、制御(カスケードP.I.D制御)することができます。

・試験管用

MG-SENS-TT型

価格 ¥19,800

・マイクロチューブ用

MG-SENS-MT型

価格 ¥19,800

東京理化学器械株式会社 <http://www.eyela.co.jp>

アイラ・カスタマーセンター ☎0120-076-554

札幌 Tel.011-709-8101
仙台 Tel.022-227-3761
那須 Tel.0287-62-6000

筑波 Tel.029-851-8241
埼玉 Tel.048-722-3713
千葉 Tel.043-275-0043

東京 Tel.03-6757-3388
横浜 Tel.045-473-5477
神奈川 Tel.0463-21-4321

静岡 Tel.054-267-1616
名古屋 Tel.052-571-3171
関西 Tel.06-6131-0905

広島 Tel.082-511-1531
福岡 Tel.092-621-5870

201709