


振盪真空濃縮機

Vortex Evaporators


VTX-2000

VTX-2500


- 可從 250 mL 快速濃縮到 1 mL
- 1 ~ 6 支樣品可同時濃縮
- 具 off timer，時間到自動停止 (max. 99 小時)
- 特別適用於環境樣品的分析
 - 戴奧辛分析
 - 農藥殘留
 - 內分泌影響物質
 - 動物用醫藥品

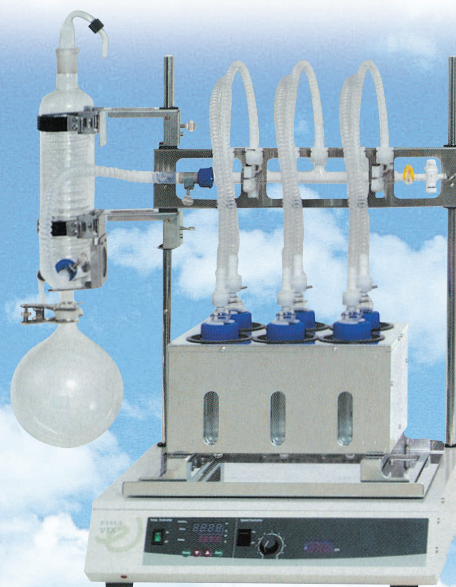


VTX-2000・2500

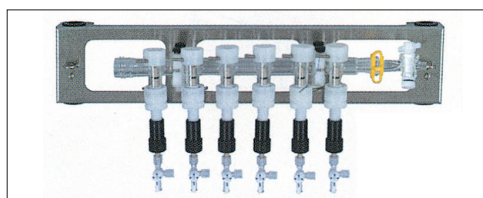


VTX-20MP 可調整個別流量 (option)

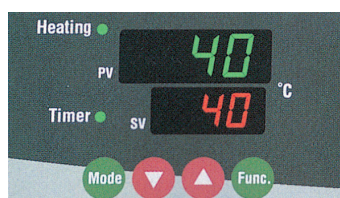

數位操作面板

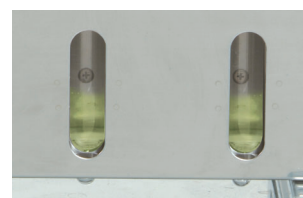

可觀察容器的濃縮狀態

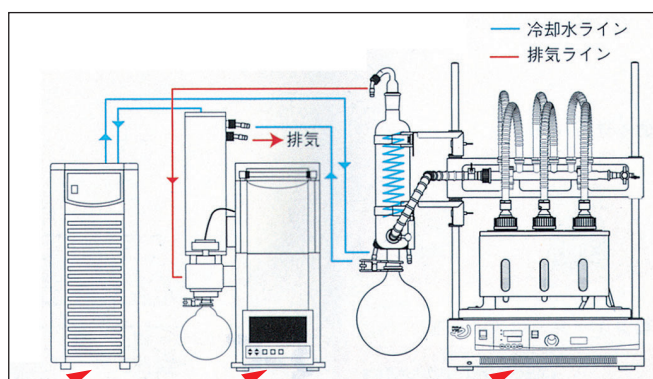

低溫循環水槽
CCA-1111 型

溶媒回收型真空幫浦
PC-2001 型

振盪真空濃縮裝置
VTX-2000 型



型 號	VTX-2000	VTX-2500
濃縮方式	回旋振盪 + 減壓濃縮	
轉 速	20 ~ 350 rpm	
溫度調節範圍	室溫+10 ~ 80 °C	
溫度調節精度	± 1 °C	
到達真空度	7 hPa (5 mmHg)	
溫度控制方式	PID 控制，可同時顯示設定及實際溫度	
容器大小	250 mL x 6	250 mL x 6
	VTX-S20VP6 型 (分析用)	VTX-S25VF6 型 (圓底型)