


# 噴霧乾燥機

Spray Dryer

## SD-1000




### 控制面板

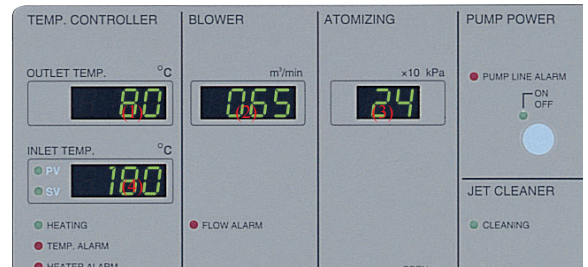


數字顯示：


- (1) 噴霧室熱風入口溫度 (°C)
- (2) 噴霧室熱風出口溫度 (°C)
- (3) 乾燥空氣流量 (m³/min)
- (4) 噴霧壓力 (x10kPa)

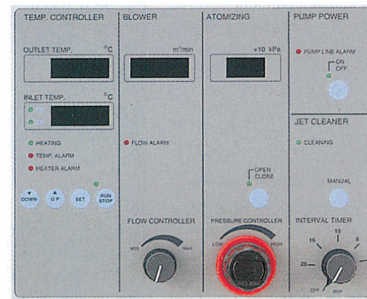

型號	SD-1000
水份蒸發量	max. 1500 mL/h
溫度調節範圍	40 ~ 200°C
溫度調節精度	± 1°C
空氣流量調節範圍	0.2-0.75 m³/min
送液幫浦流量範圍	50 ~ 1700 mL/h
樣品攪拌速率/容量	100 ~ 1000 rpm / 50 mL ~ 2L
加熱器功率	3KW
外部尺寸 (mm)	700W x 620D x 1500H
電源	21A, 4.2kVA, AC200V, 單相無插頭
重量	約 110kg

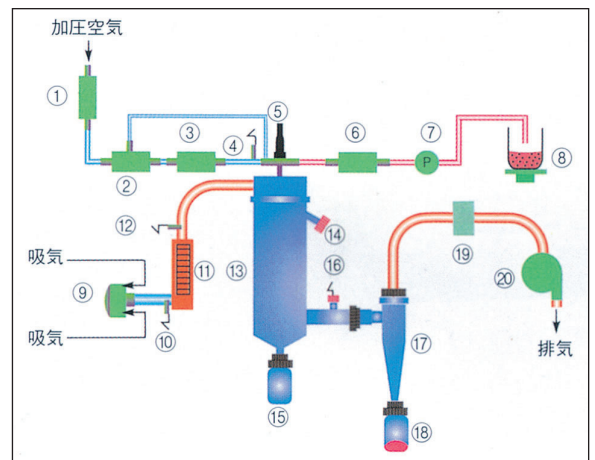


- 蒸發管及旋風管採用硬質玻璃
- 噴嘴可設定自動清洗時間或手動清洗
- 各種玻璃及管線組件，拆裝容易，清洗方便
- 粉體回收瓶容量：600 ml

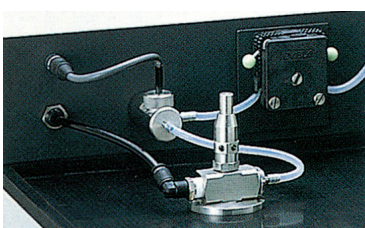

輸液幫浦具感應器，若管路破裂即會自動停止輸送



原料部具電磁攪拌裝置，可使溶液混合均勻，避免沈澱

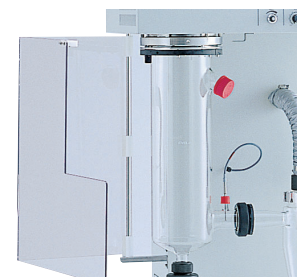

蒸發管具透明保護罩，防止高溫並易於觀察